

TRAP-6 ; Thrombin Receptor Activator Peptide 6

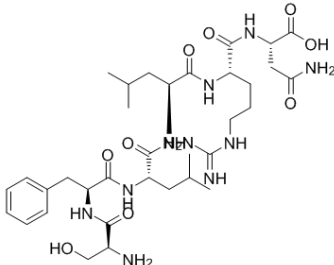
产品编号：MB0850

质量标准：>98%,BR

包装规格：5MG

产品形式：白色至类白色固体

基本信息

分子式	C34H56N10O9	结 构 式	
分子量	748.87		
CAS No.	141136-83-6		
储存条件	-20°C，避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25°C)	TFA 0.1%: soluble DMSO: ≥ 28 mg/mL Soluble to 1 mg/ml in sterile water		
注意事项	溶解性是在室温下测定的，如果温度过低，可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介：TRAP-6 是蛋白酶活化受体 1 (PAR1) 激动剂。

别名：Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn; Thrombin Receptor Activator Peptide 6; TRAP-6

物理性状及指标：

外观：.....白色至类白色固体

溶解性：.....TFA 0.1%: soluble ; DMSO: ≥ 28 mg/mL ; Soluble to 1 mg/ml in sterile water

纯度：.....>98%,BR

储存条件：.....-20°C，避光防潮密闭干燥

生物活性及研究进展

产品描述	TRAP-6 肽是对应于蛋白酶活化受体 1 (PAR1) 的残基 42-47 的六肽。其作为 PAR1 的激动剂，在离体人血小板血浆中诱导血小板聚集 (EC50 =0.8μM)。
靶点	PAR1
体外研究	TRAP-6 刺激瞬时动员细胞内自由钙、血小板聚集(EC50 = 0.8μm)和快速磷酸化 PDE3A。
体内研究	TRAP-6 (0.3 和 0.6 mg/kg) 对麻醉大鼠的平均动脉血压 (MAP) 具有三相效应，在静脉内给药后，MAP 下降很短，增加，然后 MAP 的持续减少。

美仑相关产品推荐

MB0848	Vorapaxar
MB2084	Dabigatran ; 达比加群 ; BIBR 953
MB10062	[Cit5]-凝血酶受体激动肽-5
MB10260	[Phe1,Ser2]- 凝血酶受体激动剂肽-6
MB1368	凝血酶来源于牛血浆

用途及描述：科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。TRAP-6 是蛋白酶活化

受体 1 (PAR1) 激动剂。可用于相关领域的科研。

储液配置

体 积 \ 浓 度	质 量	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM		1.3353 mL	6.6767 mL	13.3535 mL
5 mM		0.2671 mL	1.3353 mL	2.6707 mL
10 mM		0.1335 mL	0.6677 mL	1.3353 mL

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg) = 动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数 / 动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到官底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，官底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定成了误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。