

Nimustine HCl(ACNU) ; 盐酸尼莫司汀

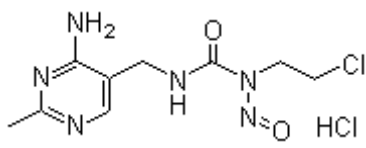
产品编号：MB1595

质量标准：>97.0%,BR,可用于细胞培养

包装规格：200MG;1G

产品形式：微黄色结晶性粉末

基本信息

分子式	C9H13ClN6O2.HCl	结 构 式	
分子量	309.15		
CAS No.	55661-38-6		
储存条件	-20℃，避光防潮密闭干燥		
溶解性	溶于甲醇(50 mg/ml), 水, 无水乙醇, 正丁醇		
注意事项	溶解性是在室温下测定的，如果温度过低，可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介：盐酸尼莫司汀是一种嘧啶亚硝脲类抗肿瘤药物，使细胞内 DNA 烷化而使 DNA 低分子化，抑制 DNA 合成。

别名：Nimustine hydrochloride ; Nimustine HCl(ACNU) ;

cs-439;nidran;nsc-245,382;NSC-D-245382;NIMUSTINE HCL;nimustinaclorhidrato

物理性状及指标：

外观：.....微黄色结晶性粉末

溶解性：.....溶于甲醇(50 mg/ml), 水, 无水乙醇, 正丁醇

干燥失重：.....≤0.5%

含量：.....>97.0%

储存条件：-20℃，避光防潮密闭干燥

产品描述：

本品作用机制主要是使细胞内 DNA 烷化而使 DNA 低分子化，抑制 DNA 合成。科研试剂，严禁用于人体。

抗肿瘤作用:

- (1) 对小鼠白血病 L-1210 显示很高的抗肿瘤活性。
- (2) 对小鼠移植肿瘤具有很广的抗肿瘤谱。对淋巴细胞白血病 L1210 粒细胞白血病 C-1498 浆细胞瘤 X-5563 (腹水型)，欧利希氏腹水癌，硬膜肉瘤 MS-147 显示卓越效果。
- (3) 本剂对淋巴细胞白血病 L1210 及甲基胆蒽诱发恶性神经胶质瘤细胞的脑内移植小鼠，有延命效果。

用途及描述：科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。盐酸尼莫司汀是一种嘧啶亚硝脲类抗肿瘤药物，与其他亚硝脲类药物雷莫司汀、卡莫司汀、司莫司汀、洛莫司汀、福莫司汀、雌莫司汀磷酸钠是治疗颅内肿瘤及脑膜白血病的主要药物，本品属亚硝脲类烷化剂，可烷化 DNA，防止 DNA 修复，也可改变 RNA 结构，改变靶细胞的蛋白质、酶结构和功能，从而起到抗肿瘤作用。可通过血脑屏障。动物实验表明，静脉滴注后有 7%~16% 进入脑脊液，最高可达 30%。静脉滴注 5 分钟后开始分布于脑室，30 分钟后脑脊液中药物浓度达到峰值，半衰期为 0.49 小时。可用于治疗脑肿瘤、肺癌、胃癌、直肠癌、食管癌、结肠癌、慢性白血病和恶性淋巴瘤等科研领域的研究，可与其他抗肿瘤药物合并使用。

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 <0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 <5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到官底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，官底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定成了误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。