

Trifluoperazine dihydrochloride ; 盐酸三氟拉嗪

产品编号 : MB1890

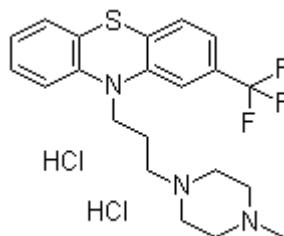
质量标准 : >99%, BR

包装规格 : 1G; 5G

产品形式 : 白色至微黄色的结晶性粉末

基本信息

分子式	C21H24F3N3S.2(HCl)	结构式
分子量	480.42	
CAS No.	440-17-5	
储存条件	常温，避光防潮密闭干燥	
溶解性 (25°C)	DMSO 88 mg/mL (183.17 mM)	
	Water : 96 mg/mL (199.82 mM)	
	Ethanol : 96 mg/mL (199.82 mM)	
注意事项	溶解性是在室温下测定的，如果温度过低，可能会影响其溶解性。	
其他说明	为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。	

**简介 :** 盐酸三氟拉嗪 Trifluoperazine 双盐酸盐是多巴胺 D2 受体抑制剂，有抗精神病和止吐作用。**别名 :** TFP; SKF5019 ; Trifluoperazine dihydrochloride ; 盐酸三氟拉嗪**物理性状及指标 :**

外观 :白色至微黄色的结晶性粉末

熔点 :~242°C,

溶解性 :DMSO 88 mg/mL (183.17 mM) ; Water : 96 mg/mL (199.82 mM) ; Ethanol : 96 mg/mL (199.82 mM)

干燥失重 :≤1.5%

含量 :>99%

IC50 :半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - 543 mg/kg

储存条件 : 常温，避光防潮密闭干燥**生物活性**

产品描述	Trifluoperazine 2HCl 是一种多巴胺 D2 受体抑制剂，IC50 为 1.1 nM。
靶点	Dopamine D2 receptor 1.1 nM
体外研究	Trifluoperazine 结合到 α1A- 和 α1B- 肾上腺受体，Ki 值分别为 27.6 nM 和 19.2 nM，α1B/α1A 比率为 0.7。 Trifluoperazine 抑制结核分枝杆菌(Mtb)，MICs 为 7.6 μg/mL。 Trifluoperazine (< 14.78 mM) 剂量依赖性抑制小鼠脾脏 NK 细胞毒活性和效应器-靶点细胞接合。 Trifluoperazine 抑制干扰素-α 或者白细胞介素-2 诱导的 NK 细胞毒活性的增加。 Trifluoperazine 抑制电压依赖性钾通道 Kv2.1 来自人大脑中(hKv2.1)的基因表达。
体内研究	间断性试验回避下行为维持的大鼠中，Trifluoperazine 剂量依赖性减少回避反应，并增加响

应失误。

美仑相关产品推荐

MB1890-S

盐酸三氟拉嗪(标准品)

用途及描述 : 科研试剂, 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面, 严禁用于人体。本品为吩噻嗪类抗精神病药, 抗精神病作用与其阻断脑内多巴胺受体有关, 抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体及直接抑制呕吐中枢, 产生强大镇吐作用, 镇静作用和抗胆碱作用较弱。

储液配置

浓度	体 积 质 量	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM		2.0815 mL	10.4076 mL	20.8151 mL
5 mM		0.4163 mL	2.0815 mL	4.1630 mL
10 mM		0.2082 mL	1.0408 mL	2.0815 mL
50 mM		0.0416 mL	0.2082 mL	0.4163 mL

【注意】

- 我司产品为非无菌包装, 若用于细胞培养, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产物变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 <0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 <5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M ²)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到官底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，官底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。