

**RO61-8048 ; RO 61-8048**

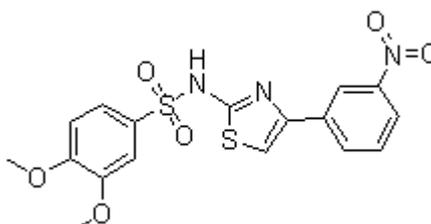
产品编号 : MB4309

质量标准 : &gt;98%,BR

包装规格 : 10MG;50MG

产品形式 : solid

**基本信息**

分子式	C17H15N3O6S2	结 构 式	
分子量	421.45		
CAS No.	199666-03-0		
储存条件	-20°C, 避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25°C)	DMSO : 84 mg/mL (199.31 mM) Water : Insoluble Ethanol : Insoluble		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

**简介 :** Ro 61-8048 是一种有效的和选择性犬尿氨酸羟化酶 ( kynurenine hydroxylase ) 抑制剂。

**别名 :** Benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-

**物理性状及指标 :**

外观 : .....淡黄色至黄色固体

溶解性 : .....DMSO : 84 mg/mL (199.31 mM) ; Water : Insoluble ; Ethanol : Insoluble

含量 : .....>98%

**储存条件 :** -20°C, 避光防潮密闭干燥

**生物活性**

<b>产品描述</b>	Ro 61-8048 是犬尿氨酸 3-羟化酶(KMO) 抑制剂, IC50 为 37 nM, Ki 为 4.8 nM。	
<b>靶点</b>	KMO	KMO
	4.8 nM(Ki)	37 nM
<b>体内研究</b>	在沙鼠和大鼠模型中, Ro 61-8048 (30 mg/kg, p.o.)诱导了犬尿氨酸 3-羟化酶的抑制。在局部或者全面的脑缺血模型中, Ro 61-8048 (40 mg/kg, p.o.)降低了缺血脑损伤。在阵发性运动障碍的仓鼠模型中, Ro 61-8048 (150 mg/kg i.p.)显著的降低了运动障碍的严重程度, 同时并未产生明显的副作用。另外, Ro 61-8048 对犬尿氨酸途径胎儿期的抑制导致了	

成年大鼠后代海马体结构的改变。

**用途及描述：**科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。Ro 61-8048 是一种有效的和选择性犬尿氨酸羟化酶（kynurenine hydroxylase）抑制剂。本品可用于相关领域的科研实验。

#### 储液配置

体 浓度	质量 积		
	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	2.3728 mL	11.8638 mL	23.7276 mL
5 mM	0.4746 mL	2.3728 mL	4.7455 mL
10 mM	0.2373 mL	1.1864 mL	2.3728 mL
50 mM	0.0475 mL	0.2373 mL	0.4746 mL

#### 经典实验操作（仅供参考）

<b>动物实验</b>	<b>Animal Models:</b> <b>Formulation:</b> 雄性白化病大鼠以及雌性沙鼠 <b>Dosages:</b> Suspended in 0.1% Tween-80 in water <b>Administration:</b> 30 μmol/kg
-------------	--

#### 【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

#### 活性化合物操作注意事项

**1 产品分装：**您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

**2 储备液制备：**大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

**3 细胞培养工作液制备：**请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新

溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

**4 体内动物实验应用：**由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表  
动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg) = 动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数 / 动物 A 的 Km 系数

## 5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡

使之完全溶解。

对于蜡状或油状的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。