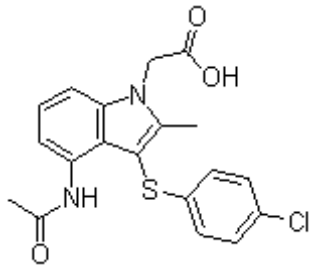


AZD1981

产品编号: MB5084
质量标准: >98%,BR
包装规格: 5MG;25MG
产品形式: solid

基本信息

分子式	C19H17ClN2O3S	结 构 式	
分子量	388.87		
CAS No.	802904-66-1		
储存条件	-20°C, 避光防潮密闭干燥		
溶解性(25°C)	DMSO: 11 mg/mL (28.28 mM) Water Insoluble Ethanol Insoluble		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介: AZD1981 是 CRTh2(DP2; GPR44)高效选择性拮抗剂。

别名: 1H-Indole-1-acetic acid, 4-(acetilamino)-3-[(4-chlorophenyl)thio]-2-methyl

物理性状及指标:

外观:白色至灰色固体

溶解性:DMSO: 11 mg/mL (28.28 mM); Water Insoluble; Ethanol Insoluble

含量:>98%

储存条件: -20°C, 避光防潮密闭干燥

生物活性

产品描述	AZD1981 是一种有效的, 选择性 CRTh2 (DP2) receptor 拮抗剂, IC50 为 4 nM, 比作用于 340 种其他酶和受体 (包括 DP1) 选择性高 1000 多倍。
特性	口服有效的选择性 DP2(CRTh2)受体拮抗剂, 临床开发用于治疗哮喘。
靶点	CRTh2 (DP2) receptor 4 nM
体外研究	AZD1981, 作为与疾病相关的细胞系统中强效拮抗剂, 抑制 DK-PGD2 诱导的 CD11b 在人嗜酸细胞中的表达, IC50 为 10 nM。AZD1981 阻断 DP2 介导的人血液中嗜酸细胞和嗜碱性粒细胞的形变, 以及 DP2 介导的人 Th2 细胞和嗜酸细胞的趋药性。此外, AZD1981 也会阻断[3H]PGD2 与小鼠, 大鼠, 豚鼠, 兔子和狗重组体 DP2 的结合。
体内研究	AZD1981 在雄性 sprague dawley 大鼠体内具有较高的口服生物利用度。在豚鼠后肢模型中, AZD1981 (100 nM)完全抑制 DK-PGD2 诱导的嗜酸性粒细胞转移。

美仑相关产品推荐(更多相关靶点抑制剂请详询官网或客服)

MB2606	NESS0327
--------	----------

MB5086	OC000459
MB3818	TAK875

用途及描述 科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。AZD1981 是 CRTh2(DP2; GPR44)高效选择性拮抗剂。本品可用于相关领域的科研实验。

储液配置

体 积 浓度	质 量 1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	2.5716 mL	12.8578 mL	25.7155 mL
5 mM	0.5143 mL	2.5716 mL	5.1431 mL
10 mM	0.2572 mL	1.2858 mL	2.5716 mL
50 mM	-	-	-

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12

豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。