

Chlorogenic acid; 绿原酸

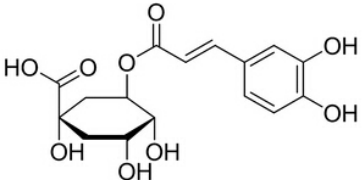
产品编号: MB6178

质量标准: HPLC≥98%,BR

包装规格: 1G; 5G

产品形式: solid

基本信息:

分子式	C16H18O9	结 构 式	
分子量	354.31		
CAS No.	327-97-9		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
溶解性(25°C)	DMSO: 71 mg/mL		
	Water: 18 mg/mL		
	Ethanol: 71 mg/mL		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介: 绿原酸 Chlorogenic acid 是咖啡和茶中的主要酚类化合物。它具有一些重要的治疗作用, 如抗氧化活性, 抗菌, 保肝, 心脏保护, 抗炎, 解热, 神经保护, 抗肥胖, 抗病毒, 抗微生物, 抗高血压。

别名: 3-O-Caffeoylquinic acid; Heriguard; NSC-407296; Cyclohexanecarboxylic acid,
3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, (1S,3R,4R,5R)-

物理性状及指标:

外观:淡黄色固体

溶解性:DMSO: 71 mg/mL ; Water: 18 mg/mL; Ethanol: 71 mg/mL

湿度:≤2.0%

灰分:≤2.0%

重金属:≤20ppm

铅:≤1.0ppm

砷:≤2.0ppm

汞:≤0.2ppm

镉:≤0.3ppm

含量:≥98%

储存条件: 常温, 避光防潮密闭干燥

生物活性

Chlorogenic Acid 是一种羟基肉桂酸, 是天然存在的有机化合物。绿原酸具有抗菌活性, 对金黄色葡萄球菌的 MIC 为 400ng/ml; 对透明质酸酶抑制的 IC50 为 1.85mmol/L; 是葡萄糖-6-P 移位酶的抑制剂; 降低非胰岛素依赖的葡萄糖排泄过快; 清除自由基活性好于生育酚和抗坏血酸, 对淡自由基的抑制强度是青霉素的 5 倍; 抗诱变; 保肝利胆, 抑制病毒的复制

美仑相关产品推荐

MB6178-S	绿原酸(标准品)
----------	----------

用途及描述：科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。本品具有一些重要的治疗作用，如抗氧化活性，抗菌，保肝，心脏保护，抗炎，解热，神经保护，抗肥胖，抗病毒，抗微生物，抗高血压，可用于相关领域的科研实验。

储液配置

体 积 \ 质 量 \ 浓度	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	2.8224mL	14.1119mL	28.2239mL
5 mM	0.5645mL	2.8224mL	5.6448mL
10 mM	0.2822mL	1.4112mL	2.8224mL
50 mM	0.0564mL	0.2822mL	0.5645mL

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6

仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。